

BAIN MARIE CONNECTE POUR HISTOLOGIE



Grâce à sa conception ovale et son encombrement réduit, EliBath, s'intègrera facilement sur la paillasse à côté de votre microtome afin d'améliorer le confort et l'efficacité des utilisateurs

Pourquoi choisir EliBath?

***Forme Ergonomique. Faible encombrement.**

Espace requis minimum sur la paillasse tout en préservant une grande surface de travail

***Contrôle numérique.**


Contrôle automatique et précis de la température

***Remplacement facile de l'eau.**

Léger, facile à transporter et à manipuler.


***Eclairage Led intégré et ajustable.**

9 couleurs au choix avec intensité ajustable

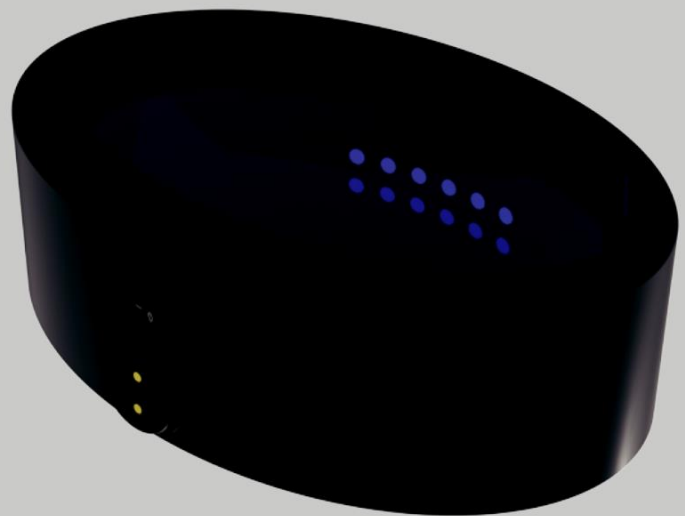



Optimisez votre station de travail!

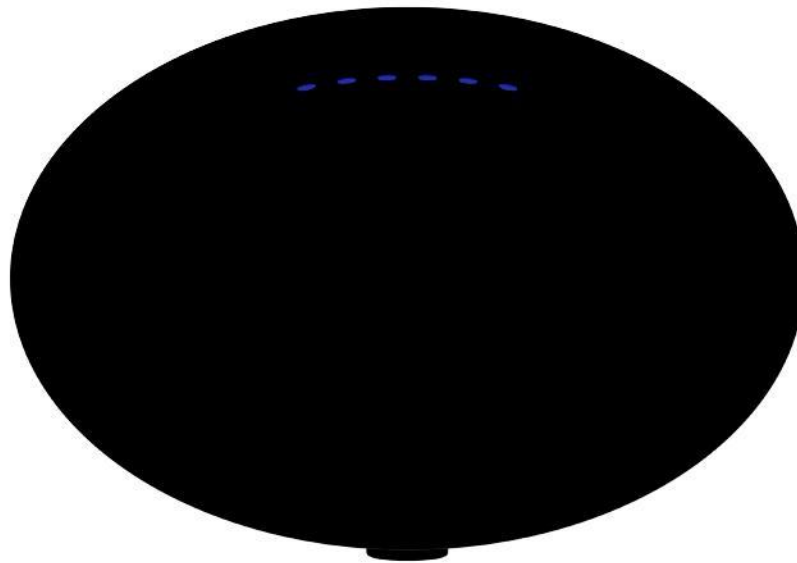

EliBath est le nouveau concept du bain-marie pour l'histologie. La forme allongée permet de travailler selon une orientation préférée pour collecter les coupes. Une profondeur utile totale de 65 mm permet d'insérer les lames verticalement. Grâce à sa conception innovante, **Elibath** maximise le volume de travail, tout en étant extrêmement compact : 1,8 litre d'eau et une profondeur utile de 65 mm pour un poids de seulement 1,4 Kg et un encombrement de 29 x 20 cm. Le port d'alimentation magnétique permet une connexion et une déconnexion rapides de l'appareil, qui, avec sa légèreté, permet de remplacer souvent l'eau, évitant les risques de contamination.

Le bain-marie peut être contrôlé par un grand écran externe, qui permet de régler les paramètres d'éclairage et d'activer les fonctions avancées.

Données techniques

Contrôle Température

Echelle de Température : Ambiante à 70 C
Voltage : 24 V DC
Puissance : Max 280 W
Capacité : 1.8 L

Dimensions

Totales: 290 x 200 x 87 mm
Cuve: 243 x 142 x 67 mm
Profondeur max : 65 mm
Niveau de remplissage : 60 mm

Poids

Bain marie 1.4 Kg

Connectivité

Compatible avec LabIOT system

Distributeur France :
TECH INTER

ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX 78770 THOIRY

Tél : 01 34 94 20 45. Email : sales@techinterlab.fr. Site : www.techinterlab.fr