
Divisione medicale

FLACON ZERO 20 A

02001.01 MODE D'EMPLOI

Récipient composé d'un bouchon de réservoir hermétiquement fermé avec 3 ml de formol à 20 % p/v et d'un récipient d'échantillonnage avec 12 ml de tampon de phosphate salin (PBS)

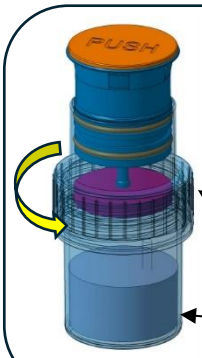

ÉTAPE 1 – OUVERTURE DU RÉCIPIENT


DÉVISSEZ LE BOUCHON DANS LE SENS ANTIHORAIRE

COMPARTIMENT SUPÉRIEUR AVEC 3 ml DE FORMOL

L'OUVERTURE DU RÉCIPIENT DONNE ACCÈS AU COMPARTIMENT DE L'ÉCHANTILLON PRÉ-REMPLI DE 12 ML DE TAMPON PHOSPHATE SALIN (PBS)

UNE PETITE TIGE EN PLASTIQUE A ÉTÉ PLACÉE À L'INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT AFIN D'AIDER L'OPÉRATEUR À LIBÉRER DE TRÈS PETITS ÉCHANTILLONS DANS LE PBS




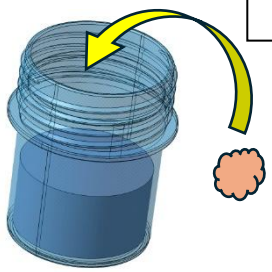

ÉTAPE 2 – INSERTION DE L'ÉCHANTILLON

INSÉREZ L'ÉCHANTILLON EN LE LIBÉRANT DANS LE TAMPON SALIN DE PHOSPHATE

SI NÉCESSAIRE, AIDEZ-VOUS DE LA PETITE TIGE EN PLASTIQUE DÉJÀ À L'INTÉRIEUR DU RÉCIPIENT

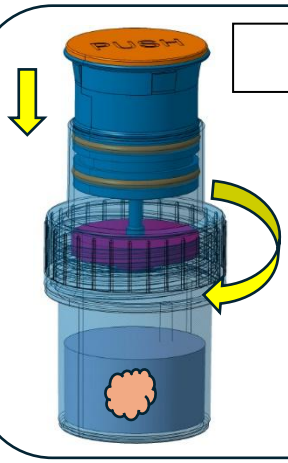

ÉTAPE 3 – FERMETURE ET ACTIVATION

3.a **REFERMEZ LE RÉCIPIENT EN VISSANT LE BOUCHON À FOND DANS LE SENS HEURES**

3.b **APPUYEZ LENTEMENT SUR LE PISTON D'ACTIVATION JUSQU'EN LA PLUS GRANDE DISTANCE POSSIBLE À L'AIDE DU DESSUS ORANGE**

L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT ACTIVÉ LORSQUE LE PISTON EST COMPLÈTEMENT ABAISSÉ. LA « BUTÉE » DU PISTON EST INDIQUÉE PAR UN LÉGER CLICK



ÉTAPE 4 – RÉCIPIENT ACTIVÉ ET FIXATION

DÉVISSEZ LE BOUCHON DANS LE SENS ANTIHORAIRE

PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE DE L'ÉCHANTILLON

LE DISPOSITIF AINSI ACTIVÉ, ÉTANT UNE INJECTION DIRECTE, VA LIBÉRER TOUT LE FORMOL DANS LE COMPARTIMENT INFÉRIEUR AVEC L'ÉCHANTILLON.

LA LIBÉRATION COMPLÈTE DE FORMOL GARANTIT UNE SOLUTION FINALE DE FORMOL À 4 % P/V

Meccanica GM S.r.l. Via Barca snc - 60025 Loreto (AN) – Italia Tel. 0039 071.970727 e.mail: medical@meccanicagm.com

FLACON ZERO 20 A

02001.01 **MODE D'EMPLOI**

20% p/v FORMOL NEUTRE NON TAMPONNÉ 3 ml + PBS Tampon phosphate (solution isotonique) 12 ml

IVD	*Dispositif médical de diagnostic in vitro pour la fixation d'échantillons histologiques*
	Risque biologique en présence de biopsie ou de matière organique
2	*Dispositif à usage unique*
NON STERILE	*Dispositif non stérile*

Description du Produit

Flacon sécurisé l avec 3 ml de formol (50% v/v 20%p/v,neutre non tamponnè) + 12 ml PBS Tampon Phosphate (solution isotonic).

Notice d'utilisation

La préparation des échantillons: L'échantillon doit être immergé dans du formol immédiatement après le prélèvement, pour une fixation appropriée qui préserve l'échantillon des processus de dégradation.

PROCÉDURE

- Dévisser le capuchon
- Insérez l'échantillon histologique dans le récipient
- Fermez le récipient en vissant et en serrant fermement le bouchon
- Appuyez lentement sur le piston jusqu'à la fin de la course pour une expulsion complète du formol dans la chambre de fixation.

Dans le laboratoire d'Anatomie Pathologique : dévisser le bouchon du récipient et extraire l'échantillon

Stockage et stabilité

Conserver fermé, dans un endroit ventilé, à une température de 15-30°C (59-86°F).

La date de péremption est imprimée sur l'étiquette. Le produit est valable 2 ans.

Élimination: le contenu et/ou le récipient doivent être éliminés dans une installation d'élimination spéciale

Meccanica GM S.r.l.
Via Barca snc - 60025 Loreto (AN) - Italia
Tel. 0039 071.970727
e.mail: medical@meccanicagm.com

DANGER



Mention de danger:

- Nocif en cas d'ingestion/Toxique en cas d'inhalation ou de contact avec la peau.
- Provoque une irritation cutanée
- Provoque une grave irritation oculaire
- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- Peut provoquer le cancer.
- Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

- Se procurer les instructions spécifiques avant utilisation.

  Évitez de respirer les fumées/brouillards/vapeurs.
- Portez des gants et des vêtements de protection.
- Protégez vos yeux et votre visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

  EN CAS D'INHALATION :
  Portez la victime à l'air libre et maintenez-la au repos dans une position propice à la respiration, consultez votre médecin


  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
  Rincez abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact. Continuer le rinçage.
- SI VOUS AVEZ ÉTÉ EXPOSÉ ou pourriez être exposé, consultez un centre antipoison/un médecin.
- Gardez le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
- Contient : FORMALDEIDE 20% p/v; MÉTHANOL.

Formol 20% p/v Neutre non tamponnè (50% v/v)
CAS No. 50-00-0
pH tra 7,0 e 7,4
Densitè 1,02 kg/l(T 25°C)

Methanol < 0,5% *CAS No. 67-56-1*

Tampon Phosphate (solution isotonique)
- ***Phosphate de sodium monobasique*** *CAS No. 10049-21-5*
- ***Phosphate de sodium dibasique*** *CAS No. 10039-32-4*

AVVERTISSEMENS IMPORTANTS

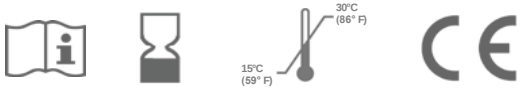

En cas d'accident grave survenant en relation avec l'appareil, informer immédiatement le fabricant et l'autorité compétente du territoire dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi